


Melgisorb® Plus

Absorberende alginatbandage

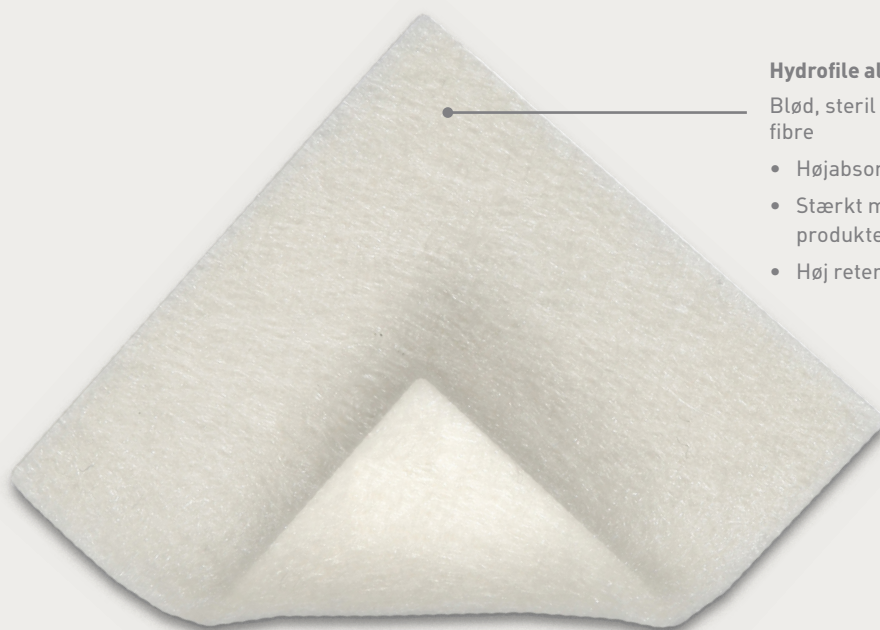


Hydrofile alginat fibre

Blød, steril bandage, lavet af calcium sodium alginat fibre


- Højabsorberende - til kraftigt væskende sår
- Stærkt materiale - muliggør fjernelse af produktet i et stykke
- Høj retentionsevne - for at undgå maceration

Melgisorb® Plus er en højabsorberende bandage, som kan bruges til en bred vifte af moderat til kraftigt væskende sår.

Sådan anvendes Melgisorb® Plus

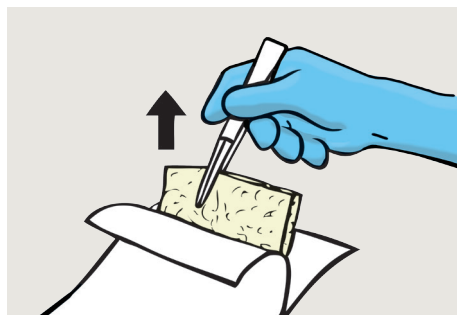


1. Vælg en størrelse Melgisorb Plus der er lidt større end såret. Åben pakningen ved at trække siderne fra hinanden.

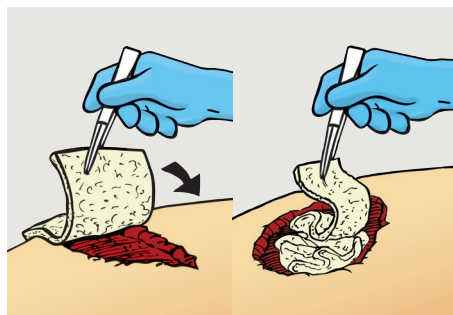

2. Tilfør den tørre Melgisorb Plus til det fugtige sårleje/sårbund.

Ikke-dybe sår: Vælg den rette størrelse bandage som kan dække hele såret.

Dybe sår og kaviteter: Klip den passende længde af Melgisorb Plus til og applicer den i såret, eller pak den løst i sårkaviteten.

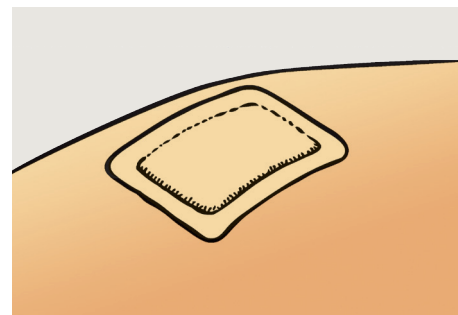

3. Afdæk og fastgør passende sekundærbandage såsom Mepilex® Border. Kompressionsterapi kan anvendes i forbindelse med Melgisorb Plus.

Sådan virker Melgisorb Plus

Melgisorb Plus absorberer store mængder sårsekret. Ved absorption formes alginatfibre til en blød, fugtig gel, som giver et fugtigt miljø, der hjælper med at fremme sårhelingen. Gelen kan nemt fjernes ved at skylle med saltvand.

Fordele ved Melgisorb Plus

- Højabsorberende
- Klæber ikke til den fugtige sårbund
- Velegnet til kavitetsår
- Skaber en gel ved kontakt med ekssudat eller saltvand
- Høj fleksibilitet
- Kan klippes til den rette form
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Bemærk

Melgisorb Plus bør ikke anvendes til tørre sår, tredjegradsforbrændinger eller kirurgiske implantater.

Hvis man opdager en infektion, følg da instruktionerne fra sundhedspersonalet.

Hvis produktet genanvendes, kan dets ydeevne forringes og krydskontaminering kan forekomme.

Anvendelsesområder

Melgisorb Plus kan anvendes til en lang række moderat til kraftigt væskende sår, med partiel til fuld sårddybde, samt inficerede og ikke-inficerede sår så som:

- Tryksår
- Bensår
- Diabetiske fodsår
- Donorsteder
- Kirurgiske sår
- Hudlæsioner og andre eksterne sår påført af traumer



Melgisorb Plus, er pakket sterilt i enkeltpakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
252000	5x5	10	100
252200	10x10	10	100
252500	10x20	10	100
253500	3x45	5	50

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød, Tlf. 48168268, info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, Melgisorb og Mepilex varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0431812


Mölnlycke®