

# Mepilex®


## Mousse absorbante de silicone molle Safetac®

### Mousse absorbante

- Absorbe l'exsudat, favorise l'équilibre hydrique
- Agit sous compression
- Maintient son intégrité
- Épouse les formes
- Hydrophile, absorption maximale des liquides

### Couche de silicone molle Safetac®

- N'adhère pas aux plaies humides
- Adhère délicatement à la peau sèche du pourtour
- S'enlève sans trauma ni douleur
- Minimise le risque de macération

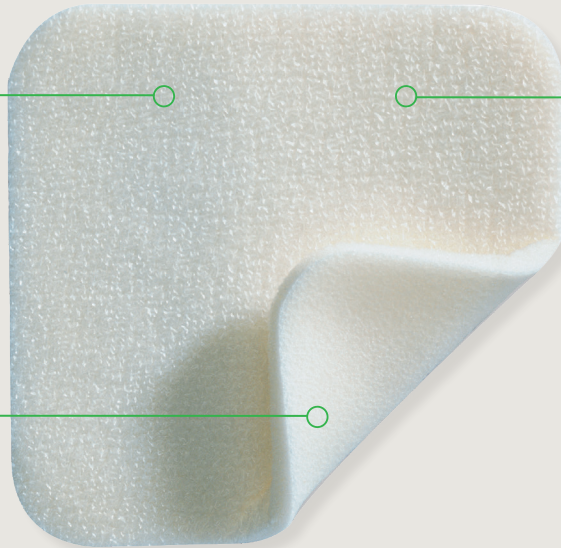

### Film backing

- Moisture vapour permeable
- Maintains a moist wound environment and promotes moisture balance
- Prevents strike-through

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE

- Atraumatique pour la plaie et la peau péri-lésionnelle
- Absorbe bien l'exsudat, même sous compression

- Favorise un équilibre hydrique optimal et réduit la fréquence des pansements
- Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque de macération

## Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac®, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde<sup>1-3</sup>.


\*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE

**Mepilex®**

  
**Mölnlycke®**

## Application de Mepilex®

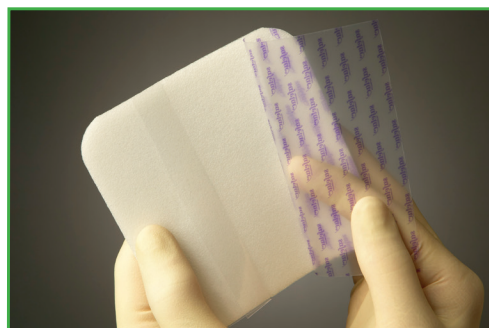


**1.** Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un pansement qui déborde la plaie d'au moins 2 cm. Retirer la pellicule anti-adhérente.



**2.** Poser le côté adhésif sur la plaie, sans étirer. Pour panser les extrémités, poser Mepilex® un peu plus bas que le centre de la plaie, pour éviter l'écoulement dû à la gravitation.



**3.** Fixer le pansement avec un ruban siliconé Mepitac®, un ruban de tissu Mefix®, un bandage compressif ou autre produit de fixation.

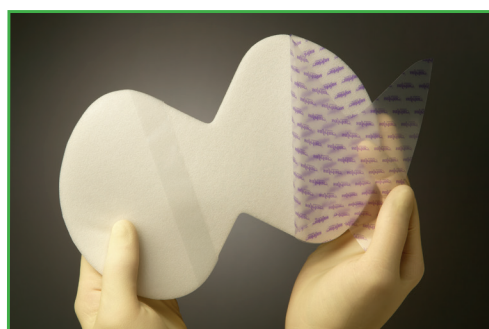

**4.** Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Mepilex® Heel doit déborder la plaie d'au moins 2 cm. Retirer la portion plus longue de la pellicule antiadhérente.



**5.** Fixer le pansement sous le pied. Retirer la portion courte de la pellicule et mouler le pansement autour du talon pour rapprocher les bords.



**6.** Pour fixer solidement Mepilex® Heel, utiliser un bandage tubulaire léger comme Tubifast®, ou avec Mepore® Film ou Mefix®.

## Mode d'action de Mepilex®

Mepilex® absorbe bien l'exsudat et minimise le risque de macération. Il entretient un milieu humide propice à la cicatrisation de la plaie. Les propriétés de SafetaC® permettent de renouveler le pansement sans endommager la plaie ou la peau et sans douleur pour le patient.

## Avantages de Mepilex®

- S'enlève sans endommager la plaie et la peau
- Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours
- Confortable
- Peut être coupé aux dimensions requises

## Sélection Mepilex®

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

## Sélection Mepilex® Heel

288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30

## Indications

Mepilex® est un pansement polyvalent pour plaies exsudatives, douloureuses ou au pourtour fragile. C'est le pansement idéal des ulcères de jambe ou de pied, plaies de pression et ulcères de pied diabétique.

Mepilex® peut être utilisé comme pansement primaire des plaies exsudatives superficielles ou comme pansement secondaire des plaies profondes.

