


Biogel® Dental Sterile

Naturgummilatex
steril dentalhandske



Biogel® Dental Sterile er en steril dentalhandske i naturgummilatex. Den giver god pasform, fingerspidsfølelse og komfort og yder god barriere beskyttelse.

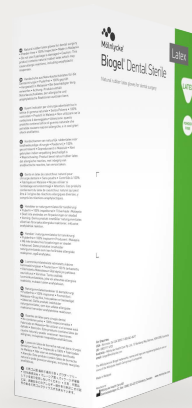

Biogel® vigtige egenskaber og fordele

- 9 ud af 10 kirurger foretrækker Biogel pga. pasform, fingerspidsfølelse og komfort¹
- Minimal risiko for huller på grund af markedets bedste AQL*-værdi på 0,65 efter pakning¹
- Hver handske (100%) er lufttrykstestet for huller, der typisk ikke opdages ved visuel inspektion¹
- Lavt endotoksin niveau (<20 EU/par) kan potentielt reducere risikoen for postoperative komplikationer²

Materialeinformation

- Naturgummilatex
- Biogel hydrogel polymer coating
- Lige fingre og ru overflade
- Manchet med rullekant
- Pudderfri

Anbefalet brug

Anbefalet til alle dentale procedurer.

Biogel kvalitet

Biogel har en brancheførende lav AQL*-værdi på 0,65. Krav ifølge standard for AQL* er 1,5. Lav værdi betyder færre huller og derved også bedre handskekvalitet.

Varenummer REF 9999

Varenr.	Str.	Par
9999055	5,5	10/æske
9999060	6,0	10/æske
9999065	6,5	10/æske
9999070	7,0	10/æske
9999075	7,5	10/æske
9999080	8,0	10/æske
9999085	8,5	10/æske
9999090	9,0	10/æske

10 æsker pr. karton

Produktspecifikationer Biogel® Dental Sterile handsker REF 9999

Varenr.	Str.	Længde, mm (Tolerance +20 mm; -10 mm)	Gns. bredde hånd- flade, mm (±3 mm)
9999055	5,5	280	74
9999060	6,0	280	79
9999065	6,5	280	85
9999070	7,0	285	90
9999075	7,5	285	96
9999080	8,0	295	101
9999085	8,5	295	106
9999090	9,0	295	114

Typisk tykkelse - enkelt materiale	
Manchet	0,21 mm
Håndflade	0,26 mm
Finger	0,28 mm

Generel information

Kontraindikationer: Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan udløse allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Allergenicitet: Alle Biogel naturgummilatex handsker har et lavt niveau af ekstraherbare proteiner (<50µg/g).

Pyrogenicitet: Hvert Biogel-parti er testet til at have et lavt endotoksin niveau (<20 EU/par).

Godkendende myndighed: I Europa er handskerne CE mærkede og overholder således det europæiske direktiv 93/42/EEC. Biogel® Dental Sterile handsker er et klasse I steriliseret produkt.

Opbevaring: Opbevares i et køligt, tørt rum væk fra varmekilder og direkte sollys.

Pakning: Hvert par handsker er pakket i høj kvalitets inderpapir, der igen er pakket i en foliepakning (fremstillet af et laminat af polyester og lavdensitets polyethylen). 10 par pr. inderæske for str. 5,5 - 9,0- 100 par pr. transportkarton.

Bortskaffelse: Handsker og foliepakning bortskaffes som klinisk affald. Indvendig papiremballage, inderæske og transportkarton kan genbruges som papir eller bortskaffes som klinisk affald.

Holdbarhed: Fem (5) år fra produktionsdato.

Producent: Produceret og pakket i Malaysia af Mölnlycke Health Care Sdn Bhd.

Oprindelsesland: Malaysia

E-mail adresse: biogel@molnlycke.com

Udgave: Marts 2018

Handskernes fysiske egenskaber	Krav iht. standard	Biogel
Brudstyrke (N) (EN455)		
Nye handsker	6	17
Efter aldring	6	16
Typisk acceleratoranalyse % v/v		
Dithiocarbamat (DTC)	intet krav	<0,02
Diphenyl thiourea (DPTU)	intet krav	ingen
Diphenyl guanidine (DPG)	intet krav	ingen
Zinc mercaptobenzothiazole (ZMBT)	intet krav	ingen
Thiuramer	intet krav	ingen
Typisk andel af vandopløselige proteiner (vha. Modified Lowry EN455:3)	<50µg/g	<20µg/g
AQL* frihed for huller, efter pakning (1000 ml vandtest) Efter pakning Typisk produktionsgennemsnit	1,5	0,65
		<0,20

Produktstandarder: Biogel® Dental Sterile handsker er testet og produceret iht. følgende standarder:

MDD 93/42/EEC	EN 455:1-4		
Viruspenetration	ASTM F1671		
Kvalitet/miljø	ISO 9001	ISO 13485	ISO 14001
Sterilisation	EN 556	EN 552	
Allergenicitet/pyrogenicitet	ISO 10993: del 5 og 10		
Medicinske symboler	EN ISO 15223:2012		

Referencer: 1. Why Choose Biogel. MKT004. 2009. Data on file. 2. Biogel Endotoxin Report, Non-Pyrogenic Surgical Gloves. REPRHJV004. 2010. Data on file.

* AQL = Acceptable Quality Level refererer til det maksimale antal af defekte produkter man finder acceptabelt, ved en tilfældig inspektion, i dette tilfælde huller i operationshandsker

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0131803

