


Veress kanyler

Truly customised laparoscopic solutions

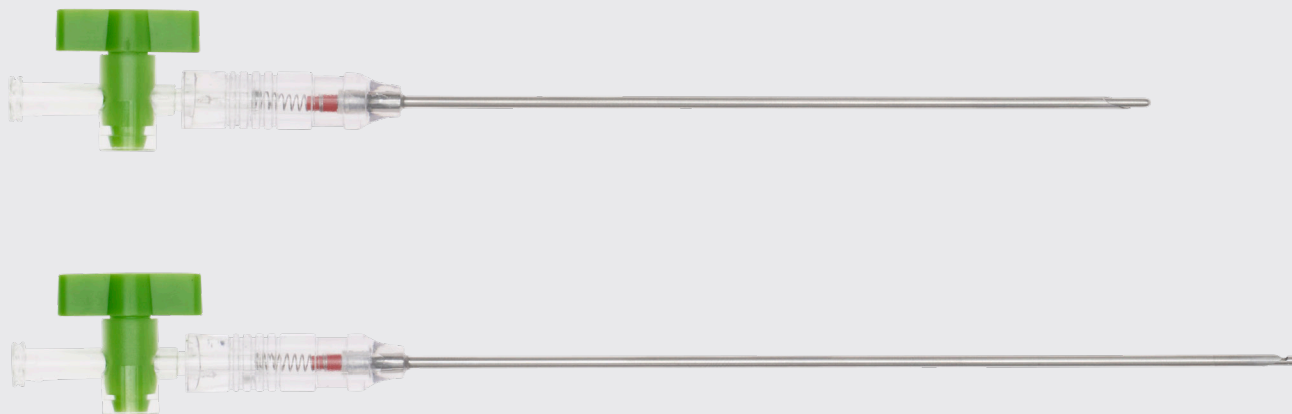

Veress kanyler bruges til at skabe et pneumoperitoneum i forbindelse med laparoskopiske procedurer.

- Skarp affaset spids giver nem og sikker gennemboring af bugvæggen
 - Transparent håndtag med klar rød visuel positionsindikator
 - Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til sikring af korrekt placering
 - Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en glat afskærmning den affasede spids for at undgå eventuelle risici for at beskadige tilstødende organer
 - High-flow roterende insufflationsventil med luer lock-tilslutning til sammenkobling med insufflationsslangen
 - Leveres i to længder – 120 mm og 150 mm
 - Stump spids med præcist placeret distal insufflationskanal til sikker og kontrolleret insufflation
- Leveres både som sterilt produkt, der er pakket enkeltvis, og til inklusion i Mölnlycke® procedrepakker.



Spidsen af veress kanyle



Veress kanyle

Varenr.	Beskrivelse	Længde	Pakning*
899105	Veress kanyle 120 mm, 14 G	120 mm	25/500
899106	Veress kanyle 150 mm, 14 G	150 mm	25/500

*inderæske/transportkarton

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS. Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf. 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com

Mölnlycke vaaremærke, navn og logo er registreret globalt for en eller flere af

Mölnlycke Health Care Group's virksomheder. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0571606

